

Tube opener and resealer

DC-19 är en röröppnare och återförslutare för rör med skruvkork eller gummikork.

DC-19 kan enkelt skruva av korken på ett provrör eller vial för åtkomst antingen manuellt eller fullt automatiserat och därefter återförsluta röret.

DC-19 kan även konfigureras för att öppna röret och kasta locket eller korken.

DC-19 anpassas helt till den rörtyp som är aktuell enligt kundens önskemål.

DC-19 kan utrustas med påfyllningsautomatik genom en arm som placerar sig över röret när det har öppnats och via en nål eller nippel som är kopplad till extern pump tillsätta exempelvis buffertlösning.

DC-19 kan även utrustas med Barcode läsare för registrering och spårbarhet av hanterat rör.

DC-19 rörstorlekar som kan hanteras.

Diameter 7 till 70 mm

Längd från 20 till 160 mm


DC-19 kan enkelt integreras i robotsystem eller annan automation via **USB/RS232 till PC dator**

Teknisk data för DC-19 i grundutförande

Yttermått L 305 x B 185 x H 288 mm

Vikt 4500 g

Försörjning 24VDC/2.5A och tryckluft 400 KPa 4L/minut

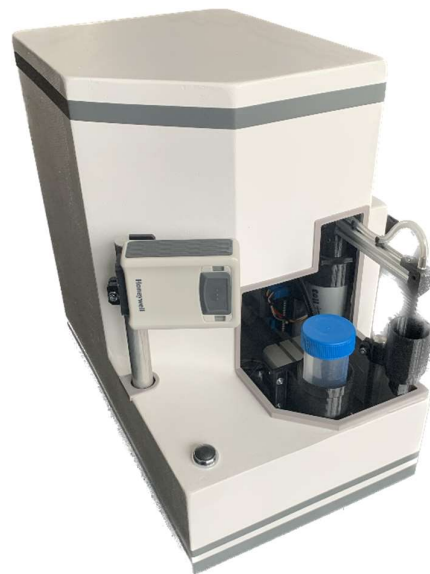

Observera att alla tekniska data kan ändras beroende på konfiguration och rörformat.